

## Σάλιο

ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ



Εκτέλεση  
περίπου 3 λεπτά



30 λεπτά πριν τη  
δειγματοληψία μην  
τρώτε ή πίνετε

## NOVO Saliva Kit

Οδηγίες χρήσης για συλλογή σάλιου στο σπίτι

### Περληψη:

Το σάλιο παρέχει ένα αξιόπιστο δείγμα για την ανάλυση του γενετικού υλικού στο εργαστήριο.

### Προβλεπόμενη χρήση:

Το «NOVO Saliva Kit» χρησιμοποιείται για τη συλλογή και αποθήκευση βιολογικού δείγματος από μη ιατρικούς ανθρώπους και μετέπειτα μεταφορά του στο εργαστήριο. Το δείγμα υποβάλλεται σε επεξεργασία από επαγγελματίες στο εργαστήριο για γενετικές αναλύσεις. Δεν απαιτείται επεμβατική δειγματοληψία για να γίνει το τεστ, επομένως το τεστ είναι επίσης κατάλληλο για χρήση από μη ιατρικούς ανθρώπους. Το προϊόν είναι κατάλληλο για μία μόνο χρήση και περιέχει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση της διαδικασίας.

### Αρχή:

Το «NOVO Saliva Kit» χρησιμοποιείται για τη συλλογή, αποθήκευση του βιολογικού δείγματος όπως και μετέπειτα για τη μεταφορά του στο εργαστήριο (Κατάλληλο για χρήση στο μη ιατρικό προσωπικό).

### Προληπτικά μέτρα και προειδοποιήσεις:

1.) Μη χρησιμοποιείτε τα περιεχόμενα του kit μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.  
2.) Μην καταψύχετε τα εξαρτήματα.  
3.) Προστατέψτε τα εξαρτήματα από μόλυνση.  
4.) Μη χρησιμοποιείτε το kit εάν το περιεχόμενο του kit ή η συσκευασία έχει καταστραφεί.  
5.) Η ανεπαρκής ή ακατάλληλη συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά δειγμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ψευδή αποτελέσματα των εξετάσεων.

### Διάθεση:

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα σκεύη στα υπολείμματα.

## Αυτό το kit περιλαμβάνει:



1 x

Χωνί



1 x

Φύσιγγα νερού



1 x

Σακουλάκι δείγματος



1 x

Σωλήνας

## Εκμάθηση βίντεο



Γρηγορά και ευκολά: Δείτε τώρα το  
επεξηγηματικό βίντεο

[qr.ng1.at/bdk0JD](https://qr.ng1.at/bdk0JD)

## Συχνές Ερωτήσεις

### Κατάπα κατά λάθος το περιεχόμενο της αμπούλας νερού.

Μην ανησυχείτε – η αμπούλα περιέχει αποστειρωμένο νερό, το οποίο δεν ενέχει κίνδυνο. Μπορείτε επίσης να καταπιείτε μια μικρή γουλιά νερού βρύσης για να το ξεπλύνετε.

### Είμαι άρρωστος – μπορώ ακόμα να κάνω τη συλλογή σάλιου;

Ναι. Η τρέχουσα κατάσταση της υγείας σας δεν επηρεάζει τα γονίδια σας.

### Μπορώ να βουρτσίσω τα δόντια μου, να μασήσω τσίχλα, να καπνίσω ή να πάρω τα φάρμακά μου πριν πάρω το δείγμα;

Προσπαθήστε να μην φάτε, πείτε, καπνίσετε ή πάρετε φάρμακα για 30 λεπτά πριν πάρετε το δείγμα.



NOVO Saliva Kit



Αυτό το kit συλλογής είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν με σήμανση CE για in vitro διαγνωστικά και πληροί τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Αυτό το kit είναι κατάλληλο για προσωπική χρήση καθώς και για επαγγελματική χρήση από ιατρικό προσωπικό.



Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη



Φυλάσσεται στους 0 – 45 °C



Ακολουθήστε τις οδηγίες



Μόνο για μία χρήση



Κατασκευαστής:  
Novogenia GmbH, Strass 19, 5301 Eugendorf,  
Austria

## Προμηθευτές

### Χωνί:

Gleissner  
Reichenhaller Straße 8, 83435 Bad Reichenhall,  
Germany

### Σωλήνας:

LVL  
Theodor-Storm-Straße 17, 74564 Crailsheim, Germany

### Φύσιγγα νερού:

Changxing Ailunda  
Gessenbergstraße 18/2, 5020 Salzburg, Austria

### Σακουλάκι δείγματος:

Anton Debatin  
Vichystraße 6, 76646 Bruchsal, Germany



## Προειδοποιήσεις

- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ενήλικες.
- Είναι πιθανό πως άνθρωποι που έχουν λάβει μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, να μη μπορούν να ολοκληρώσουν την εξέταση επιτυχώς.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το kit εάν έχετε ασθένεια που μεταδίδεται από το σάλιο.

# Οδηγίες



30 λεπτά πριν τη δειγματοληψία μην τρώτε ή πίνετε





qr.ng1.at/bdk0JD

## Προετοιμασία

1


Σαρώστε τον κωδικό QR και παρακολουθήστε τον οδηγό βίντεο.

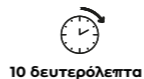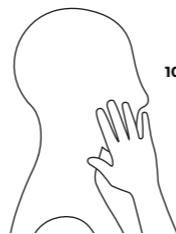

10 δευτερόλεπτα

2

Τρίψτε τα μάγουλά σας με τα χέρια σας για 10 δευτερόλεπτα για να απελευθερωθούν αρκετά κύτταρα από τον βλεννογόνο σας.

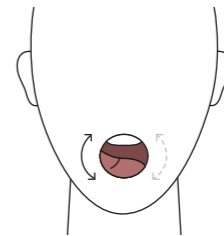



3

Περάστε τη γλώσσα σας στο εσωτερικό των μάγουλων σας μερικές φορές.



4

Ανοίξτε το σωλήνα και βάλτε το χωνί μέσα στο άνοιγμα.

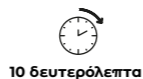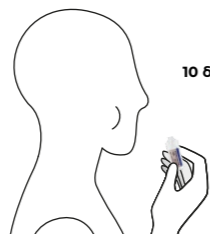


10 δευτερόλεπτα

5


## Εκτέλεση

Ανοίξτε την αμπούλα νερού και ξεπλύνετε με το αποστειρωμένο νερό στο στόμα σας για 10 δευτερόλεπτα.

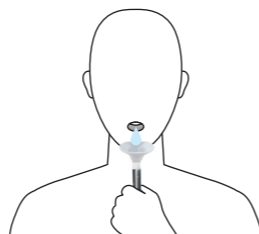

6

Φτύστε το υγρό μέσα στη χοάνη.

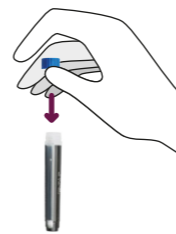

7


## Σχεδόν τελειώσες

Κλείστε ξανά το σωλήνα με το καπάκι.



8

Τοποθετήστε το σωληνάριο στη σακούλα δείγματος και σφραγίστε την με την αυτοκόλλητη ταινία.

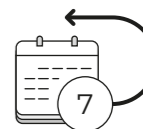

9

Επιστρέψτε το δείγμα σας το αργότερο 7 ημέρες μετά τη συλλογή. Εν τω μεταξύ, αποθηκεύστε το σε θερμοκρασία δωματίου.