

## Salivă

### INSTRUCȚIUNI DE PRELEVARE



Execuție: 3  
minute



Cu 30 de minute înainte de prelevare, nu mâncați și nu beți

## NOVO Saliva Kit

Instrucțiuni de utilizare pentru colectarea salivei acasă

### Rezumat:

Saliva oferă o probă de încredere pentru analiza materialului genetic în laborator.

### Scopul utilizării:

Kitul „NOVO Saliva Kit” este folosit pentru colectarea și păstrarea unei probe biologice de către persoanele laice și pentru transportul ulterior către laborator. Proba este prelucrată ulterior de utilizatori profesioniști în laborator pentru analize genetice. Nu este necesară o prelevare invazivă a probei pentru testare, ceea ce îl face potrivit pentru utilizare de către persoane laice. Produsul este destinat utilizării unice și conține toate componentele necesare pentru efectuare.

### Principiu:

Kitul „NOVO Saliva Kit” este utilizat pentru colectarea probelor de salivă și analiza ulterioară. Probele sunt prelucrate de utilizatori profesioniști pentru a extrage material genetic uman sau viral pentru analitică.

### Precauții și avertismente:

- 1.) Nu utilizați conținutul kitului după data de expirare imprimată pe ambalaj.
- 2.) Nu înghețați componentele.
- 3.) Protejați componentele de contaminare.
- 4.) Nu utilizați conținutul kitului dacă conținutul sau ambalajul este deteriorat.
- 5.) Colectarea, păstrarea și transportul probelor, dacă sunt efectuate inadecvat sau necorespunzător, pot duce la rezultate incorecte ale testelor.

### Eliminare:

Eliminați ustensilele utilizate în deșeuri generale.

## Acest kit include:



1 x

Pâlnie



1 x

Fiolă cu apă



1 x

Pungă pentru probe



1 x

Tub

## Ghid video



Rapid și ușor: Urmărește acum videoclipul explicativ.

[qr.ng1.at/bdk0JD](https://qr.ng1.at/bdk0JD)

## Întrebări frecvente

### Am înghițit din greșeală conținutul fiolei cu apă.

Nu vă faceți griji – fiola conține apă sterilă, care nu prezintă niciun risc. Puteți, de asemenea, să înghițiți o mică înghițtură de apă de la robinet pentru a o clăti.

### Sunt bolnav – pot totuși să fac colectarea de salivă?

Da. Starea dumneavoastră actuală de sănătate nu influențează genele dumneavoastră.

### Pot să-mi spăl dinții, să mestec gumă, să fumez sau să iau medicamentele înainte de a preleva mostra?

Încercați să nu mâncați, beți, fumați sau să luați medicamente cu 30 de minute înainte de a preleva mostra.

**REF** NOVO Saliva Kit

**IVD** **CE** Acest kit de colectare este un dispozitiv medical marcat CE pentru diagnostic in vitro și este conform cu cerințele europene.

Kitul este potrivit atât pentru utilizare personală, cât și pentru utilizare profesională de către personalul medical.



Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat.



Depozitare  
0 – 45 °C



Respectați instrucțiunile de utilizare.



Doar pentru uz unic.



Producător:  
Novogenia GmbH, Strass 19, 5301 Eugendorf,  
Austria

## Furnizori

### Pâlnie:

Gleissner  
Reichenhaller Straße 8, 83435 Bad Reichenhall,  
Germany

### Tub:

LVL  
Theodor-Storm-Straße 17, 74564 Crailsheim, Germany

### Fiolă cu apă:

Changxing Ailunda  
Gessenbergstraße 18/2, 5020 Salzburg, Austria

### Pungă pentru probe:

Anton Debatin  
Vichystraße 6, 76646 Bruchsal, Germany

## ⚠ Avertismente

- A se păstra departe de îndemâna copiilor.
- Utilizarea este permisă doar persoanelor adulte, de peste 18 ani.
- Este posibil ca genele persoanelor care au primit un transplant de celule stem să nu poată fi analizate cu succes cu acest test.
- Nu utilizați acest kit dacă suferiți de o boală transmisibilă prin salivă.

# Instrucțiuni



Cu 30 de minute înainte de prelevare,  
nu mâncați și nu beți



qr.ng1.at/bdk0JD

## Pregătire

1


Scanează codul QR și urmărește ghidul video.



10 secunde

2

Freacă-ți obraji timp de 10 secunde cu mâinile pentru a desprinde suficiente celule de pe membrana mucoasă.

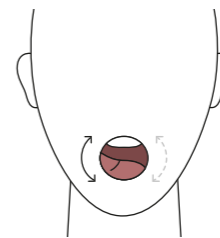


3

Trece-ți limba de câteva ori peste partea interioară a obrazilor.



4

Deschide tubul și introdu fântâna în deschidere.

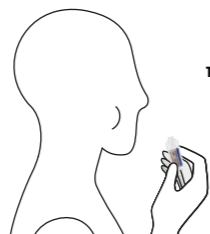


10 secunde

## Execuție


5

Deschide ampula cu apă și clătește-ți gura cu apă timp de 10 secunde.

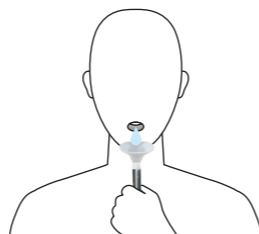

6

Scuipă lichidul prin fântână în tub.

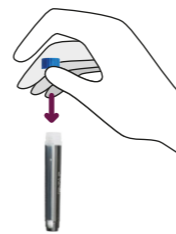

7


## Aproape Gata

Închide tubul cu capacul.



8

Pune tubul în punga pentru probe și sigilează-l cu banda adezivă.

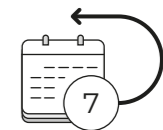

9

Returnează-ți proba cel târziu în 7 zile de la recoltare. Păstrează-la la temperatura camerei între timp.